

DORNIER RELAX+^{ENDO}

Wo Vielseitigkeit auf
Qualität trifft



FÜR DIE LITHOTRIPSIE



+

FÜR DIE ENDOUROLOGIE



Warum Relax+Endo

Vielseitiges System für eine nahtlose Integration

Ergonomisches Design für Patientenkomfort und Sicherheit

Bewährte Technologie für optimierte Workflow-Effizienz

1 Röntgendurchlässiger Karbonfaser-Tisch

- Fördert die Anwendersicherheit durch geringere Strahlenbelastung
- Die Röntgendurchlässigkeit der Karbonfaser bietet mehr Freiheit bei der Patientenpositionierung während der Bildgebung

2 Dornier UroTilt

- Ermöglicht die Neigung entlang der isozentrischen und nicht-isozentrischen Achsen zur Patientenpositionierung

3 Eine Handsteuerung für alles


- Ermöglicht in Verbindung mit der Dornier Delta® III-Serie eine präzise Patientenpositionierung und Tischbewegung per Knopfdruck.

4 Leicht zu transportieren

- Einfacher Transport - das Bremspedal an der Seite kann auf drei verschiedene Konfigurationen eingestellt werden



Hohe Kompatibilität
mit den meisten C-Bögen von Drittanbietern

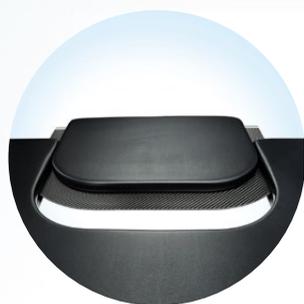

5 Modularer Aufbau mit herausnehmbaren Mittelteilen

- Durch die ein, zwei oder nicht ausgeschnittenen Mittelteile ist dieser Urologietisch ideal für Lithotripsie und Endourologie.



6 IPX2 tropfwassergeschützt

- Zusätzlicher Schutz vor Wasserschäden, selbst bei einer Neigung von 15°
- Verfügt über eine Schutzabdeckung und verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten in die Schaltkreise

Optionales Zubehör

- Infusionsflaschenhalter
- Armauflage mit Gelkissen
- Mehrachsiger Fußschalter
- Kopfverlängerung
- Armstützen und Beinhalter
- Positionierungskeil
- Nackenrolle
- Lagerungshilfe für Kleinkinder

- Unverzichtbar bei endourologischen Eingriffen