

Dornier
AXIS LEO

Limpio y claro,
en todo momento

Ureterorenoscopio digital flexible de un solo uso



9,6

Escoja
su
opción

7,5

DISPONIBLE EN 2 TAMAÑOS



Dornier *MedTech*

Si el tamaño importa,

haga su elección sin comprometer el rendimiento.


Disponible en 2 tamaños,
7,5 Fr y 9,6 Fr

7,5 Fr

9,6 Fr

UAS

Vaina de acceso ureteral

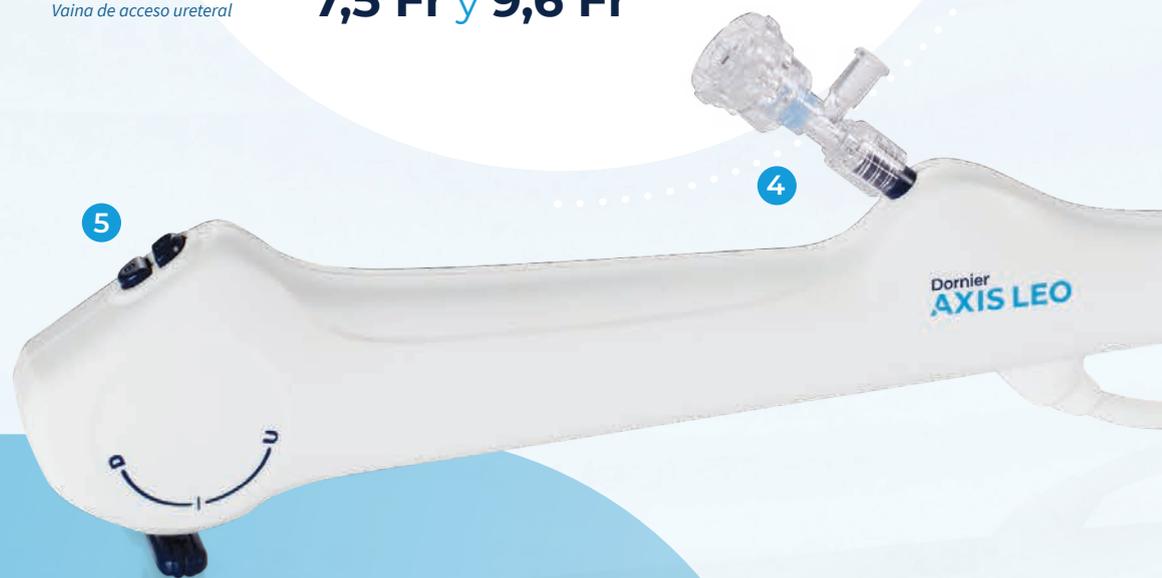

Por qué AXIS LEO

Capacidad de obtención de imágenes brillante

- Sin esterilización
- Sin reparaciones
- Disponible en todo momento
- Siempre limpio
- Rentable





| Procesador de imagen

- Gracias a las múltiples opciones de conectividad (DVI, S-Video, CVBS), es compatible con la mayoría de monitores para facilitar la integración en cualquier quirófano
- Menú de navegación fácil de usar
- Opción de almacenamiento de datos USB integrada

1 Deflexión bidireccional 270°

2 La angulación pasiva facilita el acceso a las regiones anatómicas difíciles

3 Su capacidad de torsión estable facilita la navegación controlada

4 El conector Luer Lock (incluido) permite la conexión de irrigación con el acceso al canal de trabajo

5 Los controles para el balance de blancos y la grabación de imágenes están situados al alcance de la mano

2

3

AXIS LEO Ureterorenoscopia digital flexible de un solo uso

	9,6 Fr	7,5 Fr
Información de pedidos	K1046369 9,6 Fr URS Deflexión estándar	K1048308 7,5 Fr URS Deflexión estándar
Punta distal	9,6 Fr / 3,2 mm	7,5 Fr / 2,5 mm
Canal de trabajo	3,6 Fr / 1,2 mm	
Longitud de trabajo	650 mm	
Deflexión	270° arriba/abajo	
Iluminación	Fibra óptica	LED dual
Campo de visión	120°	
Profundidad de campo	3 - 50 mm	
Píxel CMOS	400 * 400	

AXIS LEO Procesador de imagen

Información de pedidos	K1046368
Dimensiones	(Ancho) 24 cm x (largo) 30 cm x (alto) 6 cm
Peso	0,75 kg
Conexiones	USB 2.0, DVI, S-Video, CVBS

DORNIER MEDTECH ESPAÑA, S.L.

Av. Alcalde Barnils, 64-68 –
Módulo A – 1º 3ª
08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
Teléfono: +34-93-203-9316
Fax: +34-93-205-3814
Email: comercial@dornier.com